

Doküman No: IFU-GBD Documentation No: IFU-GBD	İlk yayın tarihi: 02/05/2012 Valid from: 02/05/2012	Revizyon no: 01 Revision no: 01	Sayfa:1 Page:1
		Revizyon tarihi: 26.05.2016 Revision date:26.05.2016	

GEOTEK® NEPHROSTOMY BALLOON DILATOR**ENG****Instruction for Use**

Indications: intended for Dilation of path to Kidney. Made of Medical grade PA to provide little rigidity for stress applied for dilation. There are platinum makers at both ends of balloon.

Contraindications: Infections, obstruction, incontinence

Potential Complications and risks: Potential damages of urethra, perforation and bleeding.

Cautions: This Kit should be used by only by physicians experienced in the use of such device.

Ethylen oxide sterilized. Non-pyrogenic. Check the package. if package damaged or opened do not use the products. Check the expiry date and the gauge. Do not use over expired products. Store in dry place, between 5 – 30°C temperature, protect from sun light. Possible allergic reactions should be considered. **For single Patient Use Only.** Do not attempt to clean or resterilize this product. Disposal as a biohazard material after use

Procedure:

- The kidney is penetrated with a access needle.
- A guidewire is sent through the needle ,
- When the G.wire is placed, remove the needle, with firmly holding the wire.
- Placed the balloon Catheter in desired area and inflate.
- After dilatation, deflate and remove the ballon catheter

Note: These instructions are NOT meant to define or suggest any medical or surgical technique. The individual practitioner is responsible for the proper procedure and techniques to be used with this device.



1984 : CE Mark and NB identification number

GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ
İVEDİK OSB AĞAÇ-METAL SİT. 1436 SK NO:12
YENİMAHALLE -ANKARA
TEL:+90312 3959852
FAX:+90312 3959853

GEOTEK® NEFROSTOMİ BALON DİLATÖR**TR****Kullanma Kılavuzu**

Endikasyonlar: Böbrek yolunun dilatasyonu amacıyla kullanılan bir balon kateterdir. Dilatasyon yapacak kadar yeterli sertlikte medikal aplikasyona uygun PA materyalden imal edilmiştir. Balonun her iki ucunda platinyum markerlar mevcuttur

Kontraindikasyonlar: Ciddi enfeksiyonlar, tıkanma, inkontinans

Yan Etkiler: Potansiyel ureter hasarı ve kanama


Uyarılar: Bu Set sadece bu tür cihazların kullanımında tecrübe sahibi doktorlar tarafından kullanılmalıdır.

Etilen Oksit ile steril edilmiştir. Aprojeniktir. Ambalajı kontrol ediniz, hasarlı veya açık ambalajlı malzemeleri kullanmayınız. Son kullanım tarihini ve kateter ölçüsünü kontrol ediniz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız. 5 – 30 °C desaklayınız, direkt ışıktan koruyunuz. **Yalnızca tek kullanım içindir.** Temizlemeye veya yeniden steril etmeye çalışmayınız

Prosedür:

- Böbrek yoluna uygun bir yöntemle ponksiyon iğnesi yerleştirilir.
- İğne içinde kılavuz tel yerleştirilir
- Kılavuz tel yerleştiğinde, teli tutarak iğneyi geri çekin.
- Balon kateteri istenen pozisyona yerleştirip şişirin.
- Dilatasyon sonrası balonu söndürerek, geri çıkartın.

Not: Burada yazılı talimatlar herhangi bir medikal veya cerrahi tekniği tanımlamak veya önermek amacı taşımamaktadır. Bu ürünlerle uygulanacak uygun teknik ve prosedürlerin sorumluluğu tamamen kullanan kişiye aittir.

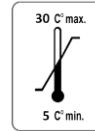

Single Use Storage limits Expiry Date

Ethylen oxide sterilized